医用听诊器使用说明书

医疗器械生产备案凭证编号：苏镇食药监械生产备 20151003 号

医疗器械产品备案凭证号：苏镇械备 20190198 号

产品技术要求编号：苏镇械备 20190198 号

【产品名称】医用听诊器

【型号/规格】插入式单用（A 型、B 型）、旋扣式双用（A 型、B 型）、多功能式。

【结构组成】医用听诊器由听诊头、导音管、耳环组成。

【适用范围】用于收集和放大从心脏、肺部、动脉、静脉和其他内脏器官处发出的声音。

【禁 忌 症】无

【主要性能指标】

1、医用听诊器传音应清晰。

2、耳挂的弹力应适宜。

3、耳挂的弹性应良好。

【安装与使用说明】

1、拆开医用听诊器内包装，取出所有部件，并核对其部件数量。


2、将医用听诊器的各部件连接且牢固可靠。

3、扁形听诊头常用于听诊高音调杂音。

4、钟形听诊头常用于听诊低音调杂音。

【多功能式配件更换方法】

多功能式医用听诊器集各种听诊器功能于一体，同时还配备了 5 种不同型号、不同结构的听诊面配件（如下图）

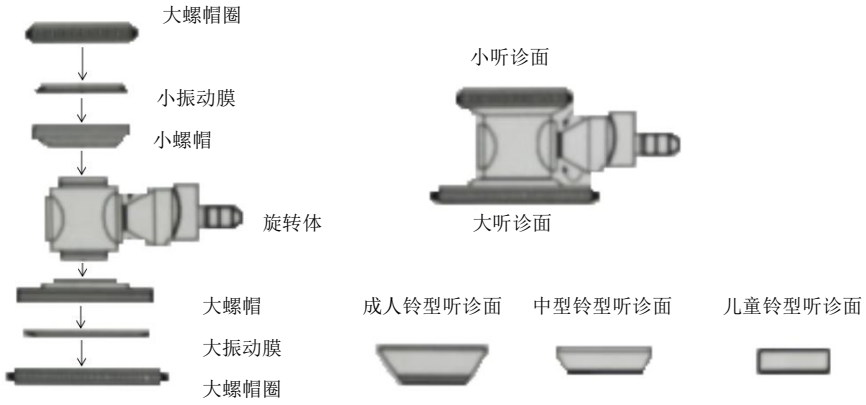

1、大振动膜：主要用于听诊成人心脏的低频音、心脏舒张音，第一、二、三心房的心跳声音，同时听诊高频带心跳杂音。

2、小振动膜：用于听诊幼儿、婴儿的高频的心脏声响变化及杂音。

3、成人型钟型听诊面：用于准确听诊成人低、中频音及杂音。

4、中型钟型听诊面：用于听诊如肋骨间的狭窄部位中、低频音与杂音。

5、儿童型钟型听诊面：最适合听诊幼儿、婴儿中、低频音与杂音。

所有这些部件设计精巧，可以清楚听诊高、低频音，并且能很轻易地听到微弱的杂音。用户可以从这三种备用的不同尺寸耳塞中选择最适合自己的一种。这三种耳塞与 3 个钟型的听诊面、2 个膜片（大、小膜片各一个）一起装在一个小型的多功能配件包内。

【多功能式使用方法】

1、首先从包装盒中取出医用听诊器，调整耳挂弹簧片的松紧度，即将两根金属管反方向张开使耳挂弹性变松，反之则变紧，调整好后把耳挂戴在耳朵上。

2、拿起听头，用手指轻敲振动膜，试听传音效果。如果听不到轻敲声，将听头旋转 180°到另一个听诊面，即相对的一面。

3、然后再轻敲一下振动膜，就能听到轻敲声，这就意味着医用听诊器处于正确的听诊位置了。

4、当你从一个听诊面转到另一个听诊面，重复同样操作程序即可。

5、依据被听诊的部位、对象，特定听诊需求，可以更换不同的听诊面以达到所需要求。

【注意事项】

1、医用听诊器膜片必须确保完好无损，且不应松动。

2、医用听诊器各连接部位应牢固可靠，保证听音效果。

【维护与保养】

1、发现听医用诊器表面沾有灰尘或异物应用软布沾干净水进行擦拭清洁。

2、医用听诊器在使用前、后最好进行消毒，具体方法是用医用棉球或医用纱布沾取 75%的医用消毒酒精将其擦拭一遍即可。

【运输和贮存条件】

1、可采用一般交通工具运输，运输途中应避免雨雪淋溅，禁止与有腐蚀的物质混装。

2、包装好的产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性物质的室内。

【配件清单】

型号/规格	配件品名及数量
插入式单用（A型）	扁形听诊头1只；导音管（A型）1套；三通1只；耳挂1套；备用膜片1片；说明书、合格证各1张。
插入式单用（B型）	扁形听诊头1只；导音管（B型）1套；耳挂1套；备用膜片1片；说明书、合格证各1张。
旋扣式双用（A型）	扁形听诊头1只；钟形听诊头1只；导音管（A型）1套；三通1只；耳挂1套；备用膜片1片；说明书、合格证各1张。
旋扣式双用（B型）	扁形听诊头1只；钟形听诊头1只；导音管（B型）1套；耳挂1套；备用膜片1片；说明书、合格证各1张。
多功能式	多功能听诊头1只；导音管1套；耳挂1套；多功能配件包1袋；说明书、合格证各1张。

【废弃物、残渣的处理】对废弃物、残渣的处理应按国家有关环境保护的规定进行处理。

【生产日期】见合格证或包装

【使用期限】 5年（易损易耗件除外）

【说明书编制日期】2025年04月15日

备案人/生产企业/售后服务单位：江苏远燕医疗设备有限公司

住所/生产地址：丹阳市陵口镇丹东工业园（陵口 122 省道工业集中区 11 号）

联系方式：0511-86662735　传真：0511-86669735　邮编：212353

合格证

检验员：检 02

检验/生产日期：